

一、研製商

來歷：由挪威設計，香港、中國製造。優選自優質陽光光波，結合中醫醫學技術秘製而成。與坊間眾多類似產品不同：

- 1、採用微精細物料，超薄、低壓、低功耗。
- 2、可充電、儲電式設計。
- 3、可配充電寶，方便移動攜帶、使用安全可靠、經久耐用。

二、光波歷史

1、萬物生長靠太陽，大家不會異議。

人呼吸是首位，水、食物是次位，太陽雖然是第三位，但是沒了太陽，人的病痛就多，乃至死亡。人也離不開太陽，與生俱來人就和太陽密不可分，我們身體機能作用與太陽的關係比我們的父母更密切，我們父母身軀也需要太陽。

2、古希臘已記載太陽光中的紅光對人的作用，可促進新陳代謝、愈合傷口等功效

（可參閱[www.wikipedia.com.Light therapy](http://www.wikipedia.com.Light%20therapy)在History段找到）但由於紅光不易獲得，當時只可通過燒紅試管變紅色、煉鋼的鋼水及鎢絲通電鎢絲變紅色，但都由於太熱，不方便使用。1903年丹麥醫生也用光治療疾病，得到若貝爾醫學獎。（可參閱www.zh.wikipedia.org/wiki）

3、很巧妙，人類創造七個音樂樂普，原來靈感也來自與七色光。

（可參閱網頁www.muzik-online.com），可抒發我們喜、怒、哀、樂情感。據說我們人類生活、工作、學習，一個星期訂為七天也與七色光有關。我們喜慶節日場合，都和紅有關（七色光第一個就是紅光）。特別股市，每年首個交易日，所有紅盤高開。人過身，股市跌，又用有關藍色和藍燈籠。

4、六十年代初，人類發明了不發熱的紅光，紅光發出的光波波段與太陽的紅光相類似。並且可把紅光的光波波段細分，純度又高，便於應用在不同領域。六十年代，美國率先做紅光又叫生命之光，應用在太空人身上，為太空人在太空船失重狀態下補充鈣質及其所需營養。近二三十年來，德國、以色列、意大利及美國等國家都在投入人造各波段光波用在醫學醫治多種疾病的研究。取得意想不到的進展。甚至對痛風、生蛇、皮膚病、精神病、癌症等都有不錯療效。光療是有其獨特之處，對某些病症、痛症是最佳選擇。不用打針也不用吃藥，和中西醫不同，是最天然、自然的醫療產品。

三、光波基理

人們對曬太陽可增加維生素D，增加鈣質，對嬰兒黃疸高需要照藍光降低黃疸等等醫學早已耳熟能詳。究其基理是陽光的光波進入我們人體線粒體，可以起到化學和生物作用。對多種痛症不僅可治標更可治本。

為何我們的產品對多種痛症有療效，有“真正神奇燈”之說呢？根據光波基理，我們採用優質紅光和優質各種光波段（光波段精度），治療各種不同痛症、病症。並且配搭不同的光波段，當這些波段照射到我們身體的線粒體時，會使線粒體異常活躍。

- 1、可給我們人體產生能量；
- 2、可增加蛋白質；
- 3、可消除自由基，把血管內、體內垃圾毒素排出；
- 4、活躍細胞；
- 5、促進新陳代謝。

用元之光產品可直接或者間接改善多種痛症、病症，不是神奇之說，是優質光波的功效。要詳細了解紅光性質和效用，請上YouTube <https://youtu.be/0wt6ptoBqfc>內有多方面論述。

在 YouTube 上觀看「遠紅外線的作用」 <https://9/youtube/FqZAoZeFCX0>,

LED美容儀-手機互動百科-紅光簡介 <http://www.baik.com/wiki/LED%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E4%BB%AA>

四、注意事項

- 1、不要直射眼睛（閉上眼睛也不能直射）；
- 2、不要直照頸部甲狀腺，防止甲亢；
- 3、本光波禁照射搽上不能內服藥物患處（搽上能內服藥物的不在此列）因此光波會把外用藥帶入體內，會產生人體其他部位不良作用。
- 4、小孩要在成年人陪同下使用，孕婦要在醫生指導下使用；
- 5、夏天或熱帶地區，使用紅光產品時溫度會熱些，隔著內衣褲或不要蓋上外衣及被單被子使用較好，以免溫度太高（不同人對熱度接受程度不同）。使用產品時避免睡著，可能會燙傷皮膚。
- 6、本產品屬於電子產品，不可放入水中清洗，燈面如有脏污可用酒精擦拭；
- 7、紅光極少人會敏感，皮膚會起紅斑一点点，請暫緩使用（光產品療效大，應用範圍廣，在醫生指導下使用更佳）。
- 8、因血液流動加速，會感覺口渴，飲水會多些。




特點：療效高、輕巧、方便使用

功效

- 1、產品通電會發出光波與小腿的肌肉、經穴產生作用，可以活躍細胞，促進血液循環，新陳代謝，使血管、筋骨暢通；
- 2、覆蓋：小腿前有足三里、上巨虛、條口、豐隆、下巨虛經穴位；小腿后有腓腸肌、合陽、承山、飛揚、跗陽經穴位；小腿內側有陰陵泉、地機、漏谷、三陰交、筑賓、交信、複溜經穴位；小腿外側陽陵泉、陽交、外丘、光明、陽輔、懸鐘經穴位，還有脛骨、中都、蠡溝足腳骨中重要部位；
- 3、改善小腿酸痛、抽筋、增強腳骨力、祛淤腫、排脂；
- 4、本產品是天然自愈療法，是通過光波（陽光的不同波段）與人體線粒體起化學、生物作用，利用人體自身能力治愈。

產品說明

- 1、小腿帶（型號:LR6-7W）；尺寸（長寬厚 cm）:10*22*0.4；功率:7W；重量:160g

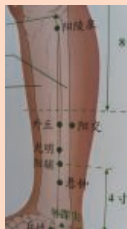

(小腿外側)




(小腿前)

經穴圖



(小腿后)

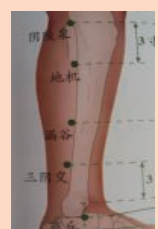

(小腿內側)

- 2、面料材質：皮革或者潛水布，採用醫療物料，不損皮膚；潛水衣物料，具彈性，有脏污可抹净。底材質：TPU醫療膠
- 3、輸入（DC5V/1A）：可用充電寶（方便攜帶，移動使用）、適配器、電腦USB點亮；本產品可根據客戶需要隨貨配備1米USB接駁線，方便接插電腦、適配器使用。（注：標配不含USB接駁線和適配器）



反面圖



大腿帶

小腿帶



正面圖

理療使用說明

穿戴示意圖圖

- 1、用充電寶點亮產品使用時，首先確認充電寶有足夠電量，防止使用中途無電。
- 2、用適配器點亮產品使用時，首先要確保適配器安全可靠，然後用USB延長線將產品連接到適配器上，將適配器插入交流插座通電點亮產品開始使用。用適配器點亮產品適合用於家中、辦公室坐著使用。
- 3、將小腿光波帶圍在小腿上，通過織帶扣緊產品，插上充電寶或者適配器點亮即可使用。
- 4、每次使用30~120分鐘（冬季及寒冷地區時間可長些），每日1~3次，視傷患程度。